



Low-Dead-Space Injektionssystem Proma inject Spritze + ZELOSTAT™ 35G Nadel

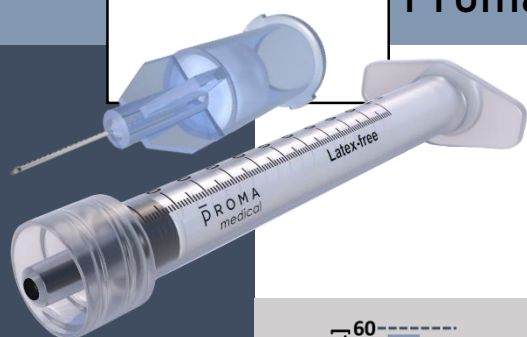


Low-Dead-Space (LDS) Luer-Lock 1ml Spritze
von Proma inject UND 35G 4mm Low-Dead-
Space Injektionsnadel von ZELOSTAT™ für
Mikroinjektionen von Botulinumtoxin

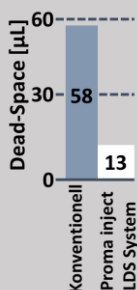

Mehr Produkt für den Patienten

Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf flexiblen, präzise ineinandergreifenden Komponenten, die den Totraum zwischen Nadel und Spritze ausfüllen und so die Produktverschwendung drastisch reduzieren.

Ab der ersten Nadel lassen sich bis zu 45µl Botulinumtoxinlösung einsparen, bei dreimaligem Nadelwechsel sind es deutlich über 100µl, was mindestens einem zusätzlichen Injektionspunkt für Ihren Patienten entspricht.

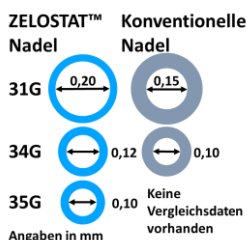

Behalten Sie Ihre Routine bei

Mit einem Innendurchmesser von 0,1mm bietet unsere 35G Nadel einen Durchfluss und Kolbendruck den Sie von einer herkömmlichen 34G Nadel kennen.


Behalten Sie Ihre Injektionstechnik bei – der Injektor spürt keinen Unterschied, der Patient fühlt weniger Nadel.



Sicherheit und Komfort

Der Luer-Lock Adapter fixiert die Injektionsnadel fest auf der Spritze, sodass der Anwender mit einem größeren Druckbereich auf dem Kolben arbeiten kann, ohne das Risiko einzugehen, dass die Nadel sich löst.

Unsere 35G Nadel ist etwa 25% dünner als herkömmliche 34G Nadeln und kann daher das Risiko von injektions-bedingten Nebenwirkungen reduzieren und so den den Komfort für den Patienten während der Injektion steigern.

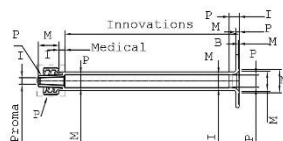

Innovation, die sich auszahlt

Die Effizienz unserer Produktionsanlagen ermöglicht es uns, die Herstellungskosten drastisch zu senken und gleichzeitig die höchsten Standards der FDA und der EMA einzuhalten. Wir sind stolz darauf, die Kosteneffizienz unserer Innovationen an unsere Kunden weitergeben zu können.

Bestellen Sie hier:



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Richtlinie und können Änderungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

PromaInject ist Teil von PromaMedical GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 10
85640 Putzbrunn – Munich,
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0
F: +49 (0)89 7474713-1
M: info@promainject.com
W: www.promainject.com

